



電解水素水整水器 **s.u.i**
本体標準価格
取付工事費別 **¥238,000** (税込¥261,800)



交換用浄水カートリッジ(別売)
PREMIUM マイクロカーボンIMaカートリッジ
標準価格 **¥13,000** (税込¥14,300)

■s.u.i 主な仕様

クラス	管理医療機器
販売名	s.u.i (スイ)
医療機器製造販売 認証番号	305AGBZX00019000
定格電圧	AC100V
定格周波数	50-60Hz
定格電流	AC4.5A
待機電力	約0.8W
消費電力	約260W
隔膜電解槽電解電圧	50V (max.)
隔膜電解槽 電極 (枚数)	4槽 (8セリ) プラチナコーティング電極 (5枚)
電極寿命	電解時間として約2000時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります)
生成水取水方式	1ウェイ方式

定格取水量 (動水圧 200kPaのとき)	電解水素水 約4リットル/分 (max.) 酸性水 約4リットル/分 (max.) 浄水 約5リットル/分 (max.)
取水排水比率 (動水圧 100kPaのとき)	約5:1
使用可能水温	35℃未満
本体重量	約3.3kg
電源コード長	約2.7m
本体寸法	254.4(W)×308.7(H)×126.2(D)mm
電解槽洗浄方式	ダブルオートチェンジクロスライン方式
電源回路	スイッチングレギュレーター制御方式
本体保護機能	分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁 (過大水压防止) 定電流制御回路 過熱防止装置 ヒューズ (基板内蔵) : 8.0A


※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。
※掲載の製品の色は印刷ですので実際の色と異なる場合があります。
※地域・水質 (地下水等) によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。



■付属品

- 水栓蛇口用分岐水栓・各種アダプター付
7種類のアダプターをセットしていますので、
一般的な蛇口であれば簡単に取り付けことが
できます。
- 入水ホース (シングルタイプ) 1.5m
- 排水ホース (シングルタイプ) 1.5m
- 吸盤
- ホース固定バンド
- pH測定キット

■取り付けできない水栓

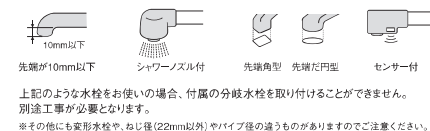

■特殊工事について

- シャワー水栓にも対応できます。

※オプション取付例



⚠ 安全上のご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このカタログに記載の商品は図内一般家庭用です。

● 飲用に適合した水 (水道水など) 以外には使用しないでください。 ● 35℃を超えるお湯を本体に通さないでください。 ● pHの測定は定期的に行い、pH10以上の水は直接飲用しないでください。 ● 次のような水は飲用しないでください。(1) 酸性水、(2) 排水ホースから出る水、(3) pH測定液が入った水 ● 医薬品は電解水素水を直接飲みしないでください。 ● 飲み方は電解水素水を飲み前に返却に相談してください。(1) 医師の指導を受けてください。(2) 身体に異常を感じている方 ● 電解水素水を飲用して身体に異常を感じたときは、飲用し続けても症状が重くなる恐れがありますので速に医師に相談してください。 ● 次の方は酸性水を飲む前に返却に相談してください。(1) 目の弱い方、(2) アルルギー体質の方 ● 酸性水を使用し、電解水素水を飲むときは、必ずやかき使用を中止し、医師に相談してください。 ● 飲用にはpH9.5前後 (pH9.0~pH10未満) をおすすめしますが、初めて飲用する方は水素水レベル1で少量から飲用してください。 ● 電解水素水は、1日当たり500~1000ミリリットルを目安に飲用してください。 ● 生成水は生成後なるべく早く使用してください。また、電解水素水/浄水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れ冷蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。

お求め、お問い合わせは

(社) 日本経済団体連合会会員 (財) 機能水研究振興財団理事
(社) 日本病院会会員 (社) 日本ホームヘルス機器協会正会員

株式会社 **日本トリム** 東京プライム証券コード: 6788

本社 / 〒530-0001 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 22F
TEL: 06-6456-4600 (代)

支社 / 札幌・仙台・東京・名古屋・広島・高知・福岡
その他事業所につきましては、当ホームページをご覧ください。

☎ 0120-328-106 <https://www.nihon-trim.co.jp/>

■製造販売元
株式会社 トリムエレクトリックマシナリー
〒783-0060 高知県高岡市豊が丘 1-5-2

「s.u.i」は
からだ・健康・毎日が
求める水をつくります



s.u.i
連続生成型電解水素水整水器

毎日飲む水を、
瞬時に電解水素水へ。
「s.u.i」で始める
ウォーターヘルスケア

Let's creating future health
with electrolyzed hydrogen water

水分補給を
良い水で

電解水素水は
「水素」を含んだアルカリ性の水。
約60%を占める
からだの水分を、
良い水で満たせます

飲むだけの
健康習慣


毎日あたり前に飲む水が
自然な健康習慣に。
未来の健康も育んでいく、
続けやすい
健康管理法です

管理
医療機器

「s.u.i」は、胃腸症状の改善に
効果が認められた
管理医療機器。
ご家族皆様で、安心して
ご利用いただけます

これからの健康に「電解水素水」

「s.u.i」は、高性能カートリッジでろ過した浄水をさらに
電気分解し、医療効果が認められた「電解水素水」を
生成する整水器。ご家庭の蛇口をひねるだけの手軽
さで、日々の健康管理をサポートします。

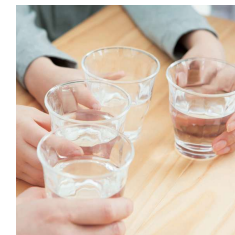

連続生成型電解水素水整水器 **s.u.i**

効果 胃腸症状の改善

- 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

医療機器製造販売認証番号: 305AGBZX00019000

※本器は医薬品医療機器等法(薬機法)第2条第4項の政令で定める医療機器であり、第6項の管理医療機器です。

The Premium

「s.u.i」がつくる特別な水は3タイプ。 飲用だけでなく、暮らしの中で ふんだんにお役立ていただけます

「s.u.i」は電解水素水をはじめ、酸性水、浄水と、様々なシーンで活用いただける3タイプの水を生成します。毎日使うものだから、快適な操作性にもこだわりました。



使いたい水をワンタッチで
誰でもシンプル操作



分岐水栓には
シャワーモードを搭載



1分間に4ℓ※
たっぷり使える通水量

※電解水素水・酸性水の場合。
浄水は1分間に5ℓとなります



生成水・レベル・水素濃度を
ランプで表示



電解水素水(ブルー)



酸性水(オレンジ)



浄水(グリーン)



電解水素水の生成中は
水素濃度を回転速度で表示
(濃度が高いほど高速回転)

連続生成型電解水素水整水器

s.u.i

電解水素水

ご家庭の水が、瞬時に電解水素水に。飲用をはじめ、お飲物や、素材洗浄・調理用の水等のお料理にもご活用いただけます。

4段階の電解水素水レベル

- 1 飲用(初めて飲む時)
- 2 飲用、炊飯用の水
- 3 飲用、コーヒー、お茶、鍋物、汁物などに
- 4 調理用(煮物、アク抜きなどに)

酸性水

電気分解でできるもう一つの水。洗顔時や、家事を快適にしてくれる洗浄用の水としてご活用いただけます。

2段階の酸性水レベル

- 1 洗顔用(肌に近い弱酸性)
- 2 食器洗い、拭き掃除の水など

※飲用はできません

浄水


「s.u.i」でつくる水のベース。ワンランク上の浄水機能でカルキや鉛等の22物質を除去した水です。

- 1 飲用(薬の服用、赤ちゃんのミルク用の水など)

整水器のしくみ



※当カタログでは、電気分解してマイナス極から生成される水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水「アルカリ性電解水」を電解水素水、プラス極から生成される「酸性電解水」を酸性水と呼びます

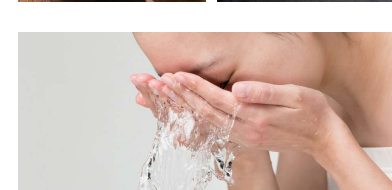

家計と環境にやさしい高性能モデル

コストメリット

たっぷり使えて、わずか1ℓ約7円。手軽に健康管理



コスト(当社試算)

〈s.u.i.〉を1日27ℓ、5年間 使用した場合

1ℓ換算 (本体261,800円+〔専用カートリッジ14,300円×4本〕
×(365日×5年×27ℓ)+電気代・水道代= 約7円
1日換算 約7円×27ℓ= 約189円

ウォーターサーバーを1ヵ月2ボトル 使用した場合

1ℓ換算 ウォーターボトル1本(12ℓ)1,320円
サーバーレンタル料等(1ヵ月)1,100円
(1,320円×2本+1,100円)+24ℓ= 約156円

※税込価格で試算 ※ご使用の地域やご使用方法によって金額は前後します


トリムオリジナル機能

長く使える電極寿命
約2,000時間



安定した
電解能力を
実現

メンテナンスフリー
独自技術で実現

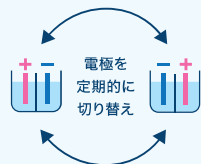

エコモードも可能
取水比率調整機能搭載



水素を豊富に生成する電極板には、酸化しにくく、耐久性に優れたプラチナを採用。電極寿命は約2,000時間、1日20分使用した場合でも、安定した電解能力が約6,000日(約16年)続きます。


器械内部の手動洗浄や定期メンテナンスは不要です。ミネラル等の電極への付着を防ぐため、定期的に電極を切り換える「ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式」を搭載しています。

「s.u.i.」には取水排水比率(標準5:1)の調整機能を搭載。電気分解により同時に2つの水(電解水素水と酸性水)がつくれますが、使う水(取水量)を多めに、排水量をさらに少なくするといった比率を変更していただけます。

すぐれた浄水性能

除去対象22物質を除去 高性能の浄水カートリッジ

非常に細かい活性炭(マイクロカーボン)を使用することで、高い浄水能力を実現。溶解物質の吸着が速く、濁りなどの微粒子も取り除きます。

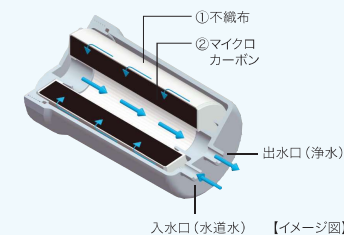

除去対象22物質

①遊離残留塩素	⑬1,2-DCE ※4
②濁り	⑭ベンゼン
③クロロホルム	⑮ジェオスミン(カビ臭)
④ブロモジクロロメタン	⑯陰イオン界面活性剤
⑤ジブロモクロロメタン	⑰フェノール類
⑥ブロモホルム	⑱PFOS及びPFOA ※5,6
⑦テトラクロロエチレン	⑲鉄(溶解性) ※6
⑧トリクロロエチレン	⑳鉄(微粒子状) ※6
⑨総トリハロメタン ※1	㉑溶解性マンガン ※6
⑩CAT(農薬) ※2	㉒アルミニウム(中性) ※6
⑪2-MIB(カビ臭) ※3	
⑫溶解性鉛	

NSF認証*取得の活性炭を使用

【NSF認証活性炭メーカー/品番】
株式会社クラレ/T-SCO 60/150THM
フタムラ化学株式会社/CN6200G

*世界的に認められた公衆安全衛生に係わる非営利機関であるNSF インターナショナルが制定した公衆安全衛生に関わる規格であり、認証には厳しい試験をクリアしなければなりません。

※1 クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4物質の総称です。 ※2 2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジンの別名で、農薬の一種です。 ※3 2-メチルイソボルネオール(カビ臭)の略称で、水道水の臭気原因物質の一つです。 ※4 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンの略称です。 ※5 有機フッ素化合物(PFAS)の一種です。 ※6 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B 基準)による物質です。

1本で10,000ℓ分の浄水能力

「s.u.i.」専用カートリッジの浄水能力は約10,000ℓ。コストメリットが大きく、ペットボトル削減につながる環境にやさしい水をつくれます。

交換目安

12ヵ月

または

総通水量
10,000ℓ



●浄水カートリッジの交換時期は、水の過量・水質・水圧などにより異なります。
●交換時期は、本器搭載の残量ランプや音声ガイダンスでお知らせします。

※浄水能力10,000ℓに対し、排水分(約16.7%)を引いた生成量として算出/取水排水比率=5:1として